

MEDICAL DYNAMICS

BENELUX

- sinds 1995 -

KWALITEIT, SERVICE, ADVIES & TRAINING



**VERLOSKUNDE
GYNAECOLOGIE
CHIRURGIE / ENDOSCOPIE**

MD MEDICAL
BENELUX DYNAMICS

INHOUDSOPGAVE

Introductie Medical Dynamics	4
Activiteiten	5

VERLOSKUNDE

MD vacuümextractiepomp	7
Dilapan-S	8
Insorb / wondhechten	9
MBO tray disposable / micro bloedonderzoek	10
ELA / amnioscoop	11
Vliezenbreker	11
Lucy - Lucy's mum - Sophie / trainingsmodellen	12
Hegenberger Speculum	13
Fjordblink / verlosbad	14-15
Hielwarmer	16

GYNAECOLOGIE

"Het pessarium in de praktijk" leerboek	19
Milex pessaria	20-25
Leep-Letz / electrodes	26-27
MD cervixnaald	27
Endometrium curette Explora Wide seal / anticonceptiepessarium	28
Wide seal / anticonceptiepessarium	28
Comfi (IUD) Thread Retriever	29
Endocell endometrium bipteersysteem	30
Wallach cryo apparaatuur LLC02 system	30
Pelican / dilators	31
MD / cervix dilatator	32
Word Bartholin katheter	32
Sonohysterografie en hysterosalpingografie	33
MD SIS katheter	33
Endosee	34
Medi-matic onderzoeks- en behandelstoel	36
Schmitz stoel met geïntegreerde colposcoop	37
Medical Dynamics en Schmitz / meubilair spreek- en onderzoekskamers	38
MD10-MD20-MD30 / instrumenten units	39
Zeiss / colposcopen	40
Mach /LED onderzoekslampen	41

CHIRURGIE/ ENDOSCOPIE

Versator / laparoscopische morcellator / Morsafe	43
4DryField PH	44-45
Plasmajet Ultra+ / energiedevice	46-47
Insorb / wondhechten	48
Materegen gel / intra-uteriene anti-adhesiegel	49
Totaalconcept : ALLY UPS - Uterien positioneersysteem	50-51
Ally uterien positioneer systeem	52
Delineator / disposable uterus manipulator	53
Rumi II systeem / uterus manipulator	54-55
Cervical sizer	55
Advincula arch / uterus manipulator	56-57
Sam uterus manipulator	58
Colpowave	59
Lone Star - retractor systeem	60-63

'TIME FLIES WHEN YOU'RE HAVING FUN!



Op 1 januari 2022 bestaat Medical Dynamics 27 jaar!

Medical Dynamics werd in 1995 opgericht door François Verhees en is op 1 januari 2022 alweer 27 jaar jong.

Medical Dynamics heeft de afgelopen 27 jaar met veel plezier de Nederlandse ziekenhuizen en privé-klinieken bediend.

Vanaf dag één ligt de focus op 'womens healthcare'. Medical Dynamics heeft de disciplines gynaecologie en obstetrie nog steeds hoog in het vaandel staan, daarnaast zijn er ook producten in ons assortiment die hun spin-off hebben naar andere disciplines zoals urologie en chirurgie.

De afgelopen 27 jaar is een succesvolle samenwerking gebleken tussen de ziekenhuizen en Medical Dynamics.

Je kunt allang niet meer van een start up spreken maar het karakter is niet sterk veranderd. Als onafhankelijke distributeur adopteren wij namelijk jaarlijks nieuwe producten in ons assortiment. De keuze om producten naar de markt te brengen bepalen wij samen met u.

Samen wordt er gekeken of een product geschikt is voor de Nederlandse markt om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de zorg.

Het is onze taak om de eindgebruikers te informeren over alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn op hun vakgebied. Een bekende terugkerende vraag van de klanten tijdens de congressen waar Medical Dynamics exposeert is dan ook: 'En, wat is er nu weer voor nieuws?' Van die nieuwe producten is er over een periode van 27 jaar een mooi aantal dat elke dag hun toegevoegde waarde in de Nederlandse ziekenhuizen bewijst.

Het afgelopen decennium is er veel wet- en regelgeving bijgekomen die zeer bepalend is voor het speelveld tussen klant en leverancier.

Team Medical Dynamics streeft altijd naar een toegankelijke en open relatie met alle betrokken beslissers binnen de ziekenhuizen, waarbij het leveren van kwaliteitsproducten, advies, service, training en continuïteit belangrijke pijlers zijn.

Wij hopen u ook de komende decennia van dienst te mogen zijn als onafhankelijke leverancier van medical devices in de Benelux.

Hartelijke groet,

Team Medical Dynamics

ACTIVITEITEN

ADVIES onder andere:

- Inrichting poli's gynaecologie en urologie
- Schmitz behandel- en onderzoeksstoelen
- Verlosbad en inrichting verloskamer
- Pessaria
- Colposcopen voor plafond of verplaatsbaar
- MACH Led onderzoekslampen

TRAININGEN EN PRESENTATIES:

- Uitleg functioneren Schmitz behandel- en onderzoeksstoelen
- Pessaria training inclusief gratis leerboek 'Het pessarium in de Praktijk'
- Vacuüm extractie training
- Hands-on training Hegenberger speculum
- Training Endosee Advance
- Hands-on training PlasmaJet Ultra+ met een laparoscopie box
- Hands-on training Insorb. Leren wondhechten met InSorb resorbeerbare nietjes

Aanvraag
advies, training
of klinische les



CONGRESSEN EN SYMPOSIA:

Voor- en najaarscongres NVOG

- Cobradagen in Noordwijkerhout
- IGO congres in Rotterdam
- WOG (werkgroep gynaecologische oncologie)
- WGE hysteroscopie cursus
- WBB (bekkenbodemcongres)



KLINISCHE LESSEN EN SUPPORT IN DE OK:

- PlasmaJet Ultra+, laparoscopie en laparotomie
- Uterusmanipulatoren: Rumi, Advincula Arch, Delineator, Colpowave en SAM.
- In-bag morcelleren: Versator morcellator systeem en/of MorSafe weefselisolatiezak
- Adhesiepreventie/hemostase: 4DryField adhesiepreventie en hemostasemiddel in één
- Retractor systeem: Lone Star
- Hands-on Insorb: Hechtsysteem met resorbeerbare nietjes voor onder andere, sectio caesarea, laparotomie, plastische chirurgie, orthopedie, thoraxchirurgie, hoofd-hals chirurgie en huid hechten na plaatsen pacemaker.



VERLOSKUNDE



- BEKIJK DEMO VIDEO'S EN FOTO'S
- VIND UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE

MD VACUÛMEXTRACTIECUPS

MD Vacuümextractie cups zijn te gebruiken bij een kunstverlossing via het geboortekanaal of via een keizersnee.

Het complete device voor alle
vacuüm verlossingen!

Volledige controle door
middel van handpomp

Met trekindicator: meet de kracht die wordt
uitgeoefend tijdens het trekken

Door het flexibele snoer kan de cup
altijd op het flex-point geplaatst
worden ongeacht de stand van het hoofd

Disposable device, gewicht en maatvoering,
past eenvoudig in de zak van uw doktersjas



artikelnr.	omschrijving
600125	MD vacuümextractiecup (15 per box)
600126	MD vacuümextractiecup met trekindicator (15 per box)

Bekijk
instructievideo



GEEF VROUWEN VERTROUWEN TIJDENS
DE INLEIDING VAN DE BEVALLING

**'DE UNIEKE COMBINATIE VAN WERKZAAMHEID,
VEILIGHEID EN PATIËNTTEVREDENHEID'**

Bekijk
instructievideo



omschrijving

Inductie van de baring
4mm x 55mm, doos 25 stuks

Afbreken van zwangerschappen 4mm x
65mm, doos 25 stuks

Hysteroscopie en moeilijke embryo transfers
3mm x 55mm, doos 25 stuks

CooperSurgical

INSORB® Skin Stapler
Absorbable | Subcuticular

Redefining Optimal Skin Closure

INNOVATIEF HECHTSYSTEEM!



ZEER GOED COSMETISCH RESULTAAT VAN DE INSORB RESORBEERBARE SKIN STAPLES BIJ EEN KEIZERSNEE!

BIJ OPERATIE



NA DRIE WEKEN



HET SNELLE SKIN CLOSURE SYSTEEM!

Steriel verpakt, single use en één device bevat 30 'staples' om 21 centimeter mee te hechten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Resorbeerbare 'staples'
- Hecht subcutaan. Geen onnodige percutane beschadigingen
- Geen consult om de nietjes te verwijderen
- Reduceren OK tijd
- Verbetert comfort en cosmetisch resultaat
- Reduceert post-operatieve pijn na een keizersnee²
- Geen hechtingen
- Minder wondcomplicaties t.o.v. metalen 'staples'³

Bekijk instructievideo's
en gebruiksaanwijzing



MBO TRAY DISPOSABLE / MICRO BLOEDONDERZOEK



bekijk
instructievideo



Micro Bloed Onderzoek d.m.v. een volledig disposable systeem, waarin het mesje en het capillair in het systeem zijn geïntegreerd. Er worden 5 extra steriele capillairen meegeleverd om na bijvoorbeeld een half uur nog een MBO te kunnen doen met hetzelfde instrument. Samen met de ELA verlichte amnioscoop heeft u een zeer compacte en handige MBO set.



Fetal Scalp Blood Sampler zonder Tray

artikelnr.	omschrijving
FBSAC	Fetal Scalp Blood Sampler Tray, met uit- en inschuifbaar mesje, inclusief 5 steriel verpakte capillairen voor gebruik bij 1 patiënt. Ingesloten setje adapters voor analyse apparatuur alsmede 6 wattenstaafjes.
FBSZAC	Combinatie verpakkingen: Fetal Scalp Blood Sampler Tray als FBSAC echter compleet met ELA01 Amnioscoop 28 mm, met automatische LED verlichting, inclusief obturator, meerdere malen te gebruiken bij 1 patiënt.
FBSW	Fetal Scalp Blood Sampler zonder Tray, met uit- en inschuifbaar mesje, inclusief 5 steriel verpakte capillairen voor gebruik bij 1 patiënt. Ingesloten setje adapters voor analyse apparatuur.
FBSZW	Combinatie verpakkingen: Fetal Scalp Blood Sampler zonder Tray als FBSW echter compleet met ELA01 Amnioscoop 28 mm, met automatische LED verlichting, inclusief obturator, meerdere malen te gebruiken bij 1 patiënt.

ELA / AMNIOSCOOP



De ELA amnioscoop voor het eenvoudig afnemen van een MBO. De verlichting in de amnioscoop gaat automatisch aan wanneer de obturator verwijderd wordt.

Standaardmaat 28 mm, ook verkrijgbaar in 18 mm.

“...very easy to use, and much more comfortable to the patient than the conventional”

— R. Singh, Specialist Registrar—

artikelnr.	omschrijving
ELA01	Amnioscoop 28mm, met automatische LED verlichting, inclusief obturator, meerdere malen te gebruiken bij 1 patiënt
ELA02	Amnioscoop 18mm, met automatische LED verlichting, inclusief obturator, meerdere malen te gebruiken bij 1 patiënt



Elektrisch verlichte Amnioscoop in 28mm en 18mm

VLIEZENBREKER

De vliezenbreker is ontworpen om de amniotomie veilig te kunnen uitvoeren. Met het ontwerp is rekening gehouden om het risico op schade aan de foetus te minimaliseren. De afgeronde tip zorgt ervoor dat de vliezenbreker niet in contact komt met de foetus.

De vliezenbreker is ergonomisch ontworpen om volledige controle te hebben over het device en is beschikbaar in een gebogen en een recht model.

artikelnr.	omschrijving
KH2	Vliezenbreker gebogen
SH2	Vliezenbreker recht



LUCY - LUCY'S MUM - SOPHIE / TRAININGSMODELLEN



Lucy - Lucy's mum - Sophie

Medical Dynamics verzorgt trainingen voor gynaecologen en verloskundigen. Wij maken gebruik van deze trainingsmodellen.

Zeer fraaie levensechte trainingsmodellen. Door het speciale composiet materiaal zijn de modellen zeer natuurgetrouw.

De elasticiteit van de modellen geeft een nagenoeg echte bevalling weer!



Bekijk instructievideo's
en gebruiksaanwijzing



artikelnr.	omschrijving
OT002	Full Birth Base Unit
FT001	Foetus (Sophie)
PL001	Placenta
UT009	Post Partum Haemorrhage Uterus
OT004	Lucy's mum Instrumental Delivery base unit
FT002	Lucy Vacuum Extraction Head

HEGENBERGER SPECULUM



VERBETER HET POST-PARTUM HECHTEN!

- Gemaakt om de kwaliteit van het hechten te verbeteren
- Zeer goede exposure van perineum trauma
- Minder stress en pijn voor de patiënt
- Hechten gaat sneller
- Geen collega nodig om te helpen
- Betere trainingsmogelijkheden
- Vermindert het risico op prikincidenten



FJORDBLINK

Welcoming Water



Het Fjordblink® verlosbad voldoet aan de behoefte van de moeder aan comfort en ruimte. Fjordblink® Birth Pools worden al meer dan 25 jaar ontwikkeld en ontworpen in samenwerking met Deense verloskundigen.

SLIM ONTWERP

De afgeronde randen zijn comfortabel om te gebruiken als ondersteuning in verschillende posities van de moeder.

Geïntegreerde zit- en ligvlakken en antislip voetsteunen vergemakkelijken het in en uit het verlosbad stappen en dienen ook als ondersteuning voor de moeder.

Er is ruimte voor de moeder om te kiezen of ze wil liggen, zitten, hurken of knielen.

Bekijk instructievideo's en gebruiksaanwijzing



In hoogte verstelbaar



EEN WARM BAD VOOR EEN VEILIGE EN COMFORTABELE BEVALLING.

In een Fjordblink® bevalbad kunt u de moeder een warm bad bieden dat pijnverlichting geeft en een veilige waterbevalling.



FJORDBLINK

Welcoming Water

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Comfortabel en ruim. Het bad geeft rust en welbevinden.
- Ruim bad voor 'active labour'
- Verschillende posities mogelijk
- Vrij bewegen mogelijk
- Bad in hoogte verstelbaar ten behoeve van de ergonomie



Voldoet aan alle eisen:

- Maximale hygiëne
- In hoogte verstelbaar
- De zorgprofessional kan om het bad heen lopen, en kan hierdoor de moeder van alle kanten bereiken
- Het bevalbad heeft wielen en kan hierdoor eenvoudig verplaatst worden naar elke gewenste kamer waar het bad nodig is. Zelfs te gebruiken in kleine verloskamers
- De moeder kan gemakkelijk en snel uit het water gehaald worden door de zorgprofessional in een noodsituatie. Zonder te hoeven wachten en zonder lift
- Docking station voor aan- en afvoer water
- Innovatieve overloopbeveiliging door sensoren

WARM GEL BABY HIELWARMER



WarmGel® Technologie

De Warmgel wegwerp hielwarmer is een met gel gevulde, disposable hielwarmer om de bloedsomloop in de hiel van de baby te stimuleren om met één prik bloed te kunnen afnemen.

Artikelcode	Omschrijving	Aantal in doos
20418	Warmgel disposable hielwarmer voor baby's	100 stuks

EFFECTIEF

- Past zich aan de vorm van de baby aan en houdt de warmte waar nodig.
- Gelijkmatische warmteverdeling verbetert de doorbloeding.

VEILIG

- Niet-toxische gel. Niet schadelijk voor de huid en ogen van baby's.
- Gebruik bij één patiënt minimaliseert het risico op infectie.
- Uniforme warmteverdeling vermindert de kans op meerdere hielprikken.

BETROUWBAAR

- Indien geactiveerd op 24 °C, stijgt de temperatuur van de hielwarmer tot maximaal 42 °C. De temperatuur neemt vervolgens geleidelijk af in de loop van de tijd.
- Hypoallergene "lift and stick" tape kan opnieuw worden bevestigd indien nodig.

MITYONE – VACUUM ASSISTED DELIVERY

MityOne werd opnieuw ontworpen op basis van feedback van vooraanstaande gynaecologen om meer controle, veiligheid en doeltreffendheid te bieden. De korte, halfstijve steel geeft voelbare feedback voor meer controle en helpt 'pop-offs' te minimaliseren.

De MityOne zorgt voor controle en veilige vaginale bevallingen en bij C-sections. Kortere shaft voor verbeterde tactiele feedback en intuïtieve bediening.

- Zelf gelimiteerde manometer overschrijdt de aanbevolen vacuumdruk van 58cmHg niet
- De MitySoft®-belcup vermindert hoofdhuidtrauma ten opzichte van stijve cups.
- Extreem hoge efficiëntie tot 97% succes met de Mushroom Cup.
- Roterende, semi-flex shaft zal geen torsie op de baby overbrengen.
- Handige stapelbare trayverpakking.



GYNAECOLOGIE

IS UW KENNIS OVER PESSARIA UP-TO-DATE?

bestel gratis het leerboek "Het pessarium in de praktijk"
geschreven door de gynaecologen
Bert Wibbens en Tjeerd Huisman

HET PESSARIUM IN DE PRAKTIJK



Bestel het
gratis leerboek





BIEDT DE BESTE ONDERSTEUNING EN COMFORT!

De conservatieve niet-chirurgische benadering van een vaginale prolaps en stress incontinentie

Pessarium bestellen voor particulieren:
WWW.PESSARIUMSHOP.NL

CooperSurgical

MILEX[®]

Bekijk instructievideo's
en gebruiksaanwijzing



MD PESSARIA

RING MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocèle

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPRS00	44 mm	14684357
MXPRS01	51 mm	14684365
MXPRS02	57 mm	14684373
MXPRS03	64 mm	14684381
MXPRS04	70 mm	14684403
MXPRS05	76 mm	14684411
MXPRS06	83 mm	14684438
MXPRS07	89 mm	14684446
MXPRS08	95 mm	14684454
MXPRS09	102 mm	14684462
MXPRS10	108 mm	14684470
MXPRS11	114 mm	14684489
MXPRS12	121 mm	14684497
MXPRS13	127 mm	14684500



RING

Milde eerste- of tweedegraads prolaps

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPER00	44 mm	14683644
MXPER01	51 mm	14683652
MXPER02	57 mm	14683679
MXPER03	64 mm	14683687
MXPER04	70 mm	14683695
MXPER05	76 mm	14683709
MXPER06	83 mm	14683717
MXPER07	89 mm	14683725
MXPER08	95 mm	14683733
MXPER09	102 mm	14683741
MXPER10	108 mm	14683768
MXPER11	114 mm	14683776
MXPER12	121 mm	14683784
MXPER13	127 mm	14683792



SHAATZ ZEEF

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocèle

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPSH112	38 mm	14684721
MXPSH134	44 mm	14684748
MXPSH2	51 mm	14684756
MXPSH214	57 mm	14684764
MXPSH212	64 mm	14684772
MXPSH234	70 mm	14684780
MXPSH3	76 mm	14684799
MXPSH314	83 mm	14684802
MXPSH312	89 mm	14684810
MXPSH334	95 mm	16176502



DONUT

Derdegraads prolaps

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPDO00	51 mm	14684608
MXPDO01	57 mm	14684616
MXPDO02	64 mm	14684624
MXPDO03	70 mm	14684632
MXPDO04	76 mm	14684640
MXPDO05	83 mm	14684659
MXPDO06	89 mm	14684667
MXPDO07	95 mm	14684675



GEHRUNG, MODELLEERBAAR

Cystocèle en rectocèle in combinatie met descensus uteri

Artikelnr.	A*	B*	C*	ZI-nummer
MXPGS00	27	38	35	16268091
MXPGS01	29	44	38	15098982
MXPGS02	35	51	41	15098990
MXPGS03	38	54	44	15099008
MXPGS04	41	57	48	15099016
MXPGS05	44	60	51	15099024
MXPGS06	48	64	54	15099032
MXPGS07	51	73	57	15099040
MXPGS08	54	76	60	15099059
MXPGS09	57	79	64	15100340



REGULA, MODELLEERBAAR

Eerste- of tweedegraads prolaps

Artikelnr.	A*	B*	C*	ZI-nummer
MXPREG00	25	49	35	15135837
MXPREG01	27	51	38	15135845
MXPREG02	29	54	41	15125262
MXPREG03	32	56	44	15125270
MXPREG04	35	57	48	15125289
MXPREG05	37	60	51	15125297
MXPREG06	38	67	54	15125300
MXPREG07	41	73	57	15125327
MXPREG08	44	79	60	15125335



* Maat in mm

* Maat in mm



MD PESSARIA

HODGE, MODELLEERBAAR

Retrodisplacement. 1e en 2e graads prolaps

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPEH00	70	44	15099393
MXPEH01	76	48	15099407
MXPEH02	83	49	15099415
MXPEH03	89	51	15099423
MXPEH04	92	54	15099431
MXPEH05	95	57	15099458
MXPEH06	98	60	15099466
MXPEH07	108	64	15099504
MXPEH08	117	67	15099482
MXPEH09	127	70	15099512

* Maat in mm

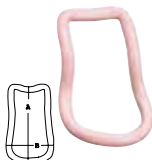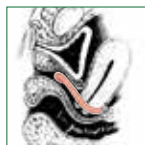

HODGE MET STEUNVLAK, MODELLEERBAAR

Retrodisplacement in combinatie met een milde cystocèle

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPHS00	70	44	15100235
MXPHS01	76	48	15100243
MXPHS02	83	49	15100251
MXPHS03	89	51	15100278
MXPHS04	92	54	15100286
MXPHS05	95	57	15100294
MXPHS06	98	60	15100308
MXPHS07	108	64	15100316
MXPHS08	117	67	15100324
MXPHS09	127	70	15100332

* Maat in mm



GELHORN

Derdegraads prolaps

Flexibel		Kort		
Artikelnr.	ZI-nummer	artikelnr.	ZI-nummer	Diameter
MXPGE112	15098885	MXPGS5112	16381645	38 mm
MXPGE134	15098893	MXPGS5134	16381653	44 mm
MXPGE2	15098907	MXPGS52	16381661	51 mm
MXPGE214	15098915	MXPGS5214	16381696	57 mm
MXPGE212	15098923	MXPGS5212	16381688	64 mm
MXPGE234	15098931	MXPGS5234	16381718	70 mm
MXPGE3	15098958	MXPGS53	16381726	76 mm
MXPGE314	15098966	MXPGS5314	16381734	83 mm
MXPGE312	15098974	MXPGS5312	16381742	89 mm
MXPGE334	16381637	MXPGS5334	16381645	95 mm



KUBUS

Derdegraads prolaps rectocèle, kortstondig gebruik (max. 24 uur)

Flexibel		met gaatjes		
Artikelnr.	ZI-nummer	artikelnr.	ZI-nummer	Diameter
MXPECO0	14684519	MXPECH00	15398307	25 mm
MXPECO1	14684527	MXPECH01	15398315	30 mm
MXPECO2	14684535	MXPECH02	15398323	35 mm
MXPECO3	14684543	MXPECH03	15398331	38 mm
MXPECO4	14684551	MXPECH04	15398358	41 mm
MXPECO5	14684578	MXPECH05	15398366	44 mm
MXPECO6	14684586	MXPECH06	15398374	51 mm
MXPECO7	14684594	MXPECH07	15398382	57 mm



GEHRUNG MET KNOP, MODELLEERBAAR

Cystocèle en rectocèle in combinatie met descensus uteri, in combinatie met stressincontinentie

Artikelnr.	A*	B*	C*	ZI-nummer
MXPGSK00	27	38	35	16383877
MXPGSK01	29	44	38	15099067
MXPGSK02	35	51	41	15099105
MXPGSK03	38	54	44	15099113
MXPGSK04	41	57	48	15099148
MXPGSK05	44	60	51	15099156
MXPGSK06	48	64	54	15099172
MXPGSK07	51	73	57	15099199
MXPGSK08	54	76	60	15099202
MXPGSK09	57	79	64	15099245

* Maat in mm



TANDEM KUBUS

Derdegraads prolaps rectocèle, kortstondig gebruik (max. 24 uur)

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPECT20	35 & 25 mm	15100405
MXPECT31	38 & 30 mm	15100413
MXPECT42	41 & 35 mm	15100421
MXPECT53	44 & 38 mm	15100448
MXPECT64	51 & 41 mm	15100456
MXPECT75	57 & 44 mm	15100464




MD PESSARIA

ZEEF/ URETHRA MET ONDERSTEUNING

Stressincontinentie met een milde prolaps en milde cystocèle

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCONDS00	55	68	15100162
MXPCONDS01	60	73	15100170
MXPCONDS02	65	78	15100189
MXPCONDS03	70	83	15100197
MXPCONDS04	75	88	15100200
MXPCONDS05	80	93	15100219
MXPCONDS06	85	98	15100227

* Maat in mm

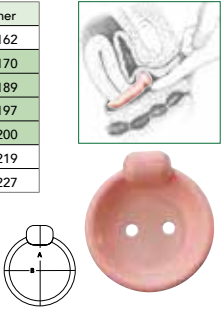


ZEEF/ URETHRA

Stressincontinentie met een milde prolaps

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCOND00	55	68	15100073
MXPCOND01	60	73	15100081
MXPCOND02	65	78	15100103
MXPCOND03	70	83	15100111
MXPCOND04	75	88	15100138
MXPCOND05	80	93	15100146
MXPCOND06	85	98	15100154

* Maat in mm

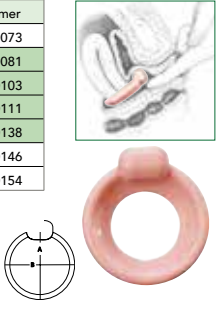

URETHRA

Stressincontinentie

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPCON00	44	57	15099962
MXPCON01	51	64	15099970
MXPCON02	57	70	15099989
MXPCON03	64	77	15099997
MXPCON04	70	83	15100006
MXPCON05	76	89	15100014
MXPCON06	83	96	15100022
MXPCON07	89	102	15100030
MXPCON08	95	108	15100049
MXPCON09	102	115	15100057
MXPCON10	108	121	15100065
MXPCON11	114	127	16383893
MXPCON12	121	134	16383907
MXPCON13	127	140	16383915



URETHRA MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Stressincontinentie gecombineerd met een milde eerste- of tweedegraads prolaps en milde cystocèle

Artikelnr.	B*	A*	ZI-nummer
MXPRSK00	44	57	15100650
MXPRSK01	51	64	15100669
MXPRSK02	57	70	15100677
MXPRSK03	64	77	15100685
MXPRSK04	70	83	15100693
MXPRSK05	76	89	15100707
MXPRSK06	83	96	15100715
MXPRSK07	89	102	15100723
MXPRSK08	95	108	15100731
MXPRSK09	102	115	15100758
MXPRSK10	108	121	15100766
MXPRSK11	114	127	15100774
MXPRSK12	121	134	15100782
MXPRSK13	127	140	15100790



HODGE MET KNOP, MODELLEERBAAR

Stressincontinentie waarbij de vaginale toegankelijkheid smal is


Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPEHK00	70	44	15099563
MXPEHK01	76	48	15099598
MXPEHK02	83	49	15099601
MXPEHK03	89	51	15099636
MXPEHK04	92	54	15099652
MXPEHK05	95	57	15099660
MXPEHK06	98	60	15099679
MXPEHK07	108	64	15099687
MXPEHK08	117	67	15099695
MXPEHK09	127	70	15099709



HODGE MET STEUNVLAK EN KNOP, MODELLEERBAAR

Stressincontinentie en een milde cystocèle waarbij de vaginale toegankelijkheid smal is


Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPHSK00	70	44	15100480
MXPHSK01	76	48	15100499
MXPHSK02	83	49	15100502
MXPHSK03	89	51	15100510
MXPHSK04	92	54	15100529
MXPHSK05	95	57	15100545
MXPHSK06	98	60	15100553
MXPHSK07	108	64	15100561
MXPHSK08	117	67	15100588
MXPHSK09	127	70	15100596

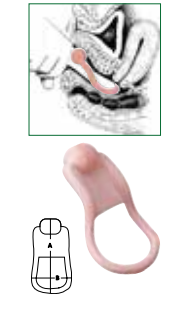

INFLATO BAL

Milde eerste- of tweedegraads prolaps in combinatie met een milde cystocele en rectocele, kortstondig gebruik (max. 24 uur)

Artikelnr.	Diameter	ZI-nummer
MXPINFS	51 mm	14684705
MXPINFM	57 mm	14684691
MXPINFL	64 mm	14684683
MXPINFXL	70 mm	14684713

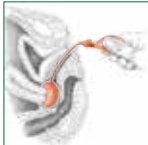

LET OP: LATEX UITVOERING!!



VERLOSKUNDIGE INDICATIE: CERVIX-INSUFFICIËNTIE

SMITH

Modificatie van het Hodge-pessarium. Ontworpen voor patiënten met stress-urine-incontinentie en te gebruiken bij herhaalde miskramen als gevolg van cervix-insufficiëntie door het gewicht van de groeiende foetus te ondersteunen

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPES00	79	51	17008484
MXPES01	83	54	17008492
MXPES02	89	57	16899075
MXPES03	95	60	17008263
MXPES04	108	64	17008271
MXPES05	114	67	17008298
MXPES06	121	70	17008506
MXPES07	127	73	17008514
MXPES08	140	76	17008522
MXPES09	146	79	17008549



RISSER

Zorgt voor een vermindering van de belasting van de uterus. Te gebruiken bij herhaalde miskramen als gevolg van cervix-insufficiëntie door het gewicht van de groeiende foetus te ondersteunen.

Artikelnr.	A*	B*	ZI-nummer
MXPR100	79	51	17008557
MXPR101	83	54	17008565
MXPR102	89	57	17008301
MXPR103	95	60	17008328
MXPR104	108	64	17008336
MXPR105	114	67	17008344
MXPR106	121	70	17008573
MXPR107	127	73	17008581
MXPR108	140	76	17008603
MXPR109	146	79	17008611



IS UW KENNIS OVER PESSARIA UP-TO-DATE?



Vraag het boek aan:
"Het pessarium in de praktijk"
geschreven door de gynaecologen
Bert Wibbens en Tjeerd Huisman

Vraag leerboek aan



Scan de barcode of mail
info@medicaldynamics.nl

MD PESSARIA

LOSSE PASRINGEN MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Artikelnr.	Diameter	Komt overeen met te gebruiken roze ring pessarium met ondersteuningsvlak
MXFIT0020	57 mm	MXPRS02
MXFIT0021	64 mm	MXPRS03
MXFIT0022	70 mm	MXPRS04
MXFIT0023	76 mm	MXPRS05
MXFIT0024	83 mm	MXPRS06
MXFIT0025	89 mm	MXPRS07

LOSSE PASRINGEN DONUT


Artikelnr.	Diameter	Komt overeen met te gebruiken roze donut pessarium
MXFIT0805	64 mm	MXPDO02
MXFIT0806	70 mm	MXPDO03
MXFIT0807	76 mm	MXPDO04
MXFIT0808	83 mm	MXPDO05

LOSSE PASRINGEN KUBUS

Artikelnr.	Diameter	Komt overeen met te gebruiken roze kubus pessarium
MXFIT0809	35 mm	MXPEC02
MXFIT0810	38 mm	MXPEC03
MXFIT0811	41 mm	MXPEC04
MXFIT0812	44 mm	MXPEC05

POP-Q RULER

POP-Q (Pelvic Organ Prolapse-Quantification), dat wil zeggen het objectief in kaart brengen van het meest verzakte punt van de prolaps en van welk compartiment deze uit gaat. Het is cruciaal voor de 'nulmeeting' voorafgaand aan de behandeling. Deze 'nulmeeting' is ook van belang om vast te stellen of er een relatie is tussen de geïmponeerde klachten en de waargenomen anatomie van de prolaps.

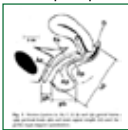

LOSSE PASRINGEN GELLHORN

Artikelnr.	Diameter	Komt overeen met te gebruiken roze gellhorn pessarium
MXFIT0012	57 mm	MXPGE214
MXFIT0013	64 mm	MXPGE212
MXFIT0014	70 mm	MXPGE234
MXFIT0015	76 mm	MXPGE3

LOSSE PASRINGEN ZEEF/ URETHRA MET ONDERSTEUNINGSVLAK

Artikelnr.	Diameter	Komt overeen met te gebruiken roze zeef/ urethra pessarium
MXFIT0801	65 mm	MXPCONDS02
MXFIT0802	70 mm	MXPCONDS03
MXFIT0803	75 mm	MXPCONDS04
MXFIT0804	80 mm	MXPCONDS05



MD PASKOFFER

Inhoud:

- 6 gele siliconen pasringen, ring met ondersteuning
- 4 gele siliconen pasringen, kubus
- 4 gele siliconen pasringen, donut
- 4 gele siliconen pasringen, gellhorn
- 4 gele siliconen pasringen, ring met knop
- Fantoom voor instructie inbrengen pessarium

Artikelnnummer: MXFIT
ZI-nummer: 14857286




PESSARIUM REMOVER



Artikelnnummer: PRM2
KNMP nr: 16381750

Artikelnnummer: 5000000
Verpakking: folie met 100 stuks

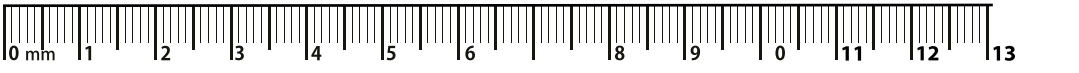

LEEP-LETZ / ELECTRODES

TUNGSTEN WIRE

Universele electrodes gemaakt van duurzame 'tungsten medical grade wire' voor een optimaal biopt alsmede hoogwaardige isolatie voor optimale veiligheid.

Zeer ruime keuze in maatvoering. Al onze lissen hebben een (HEX) aansluiting om draaien in het handvat te voorkomen!

KLEURCODES

Individueel kleur gecodeerd om de arts te helpen bij de keuze van de electrode.

Op die manier is het gemakkelijk om de verschillende afmetingen te identificeren tijdens de selectie van de electrode.

DISPOSABLE

Bedoeld voor eenmalig gebruik.

STANDAARD AFMETINGEN

Geschikt voor de standaard controle pennen 2,36 mm.

Bekijk instructievideo's
en gebruiksaanwijzing



ELECTRODE ROND



LEEP-LETZ / ELECTRODES

ELECTRODE VIERKANT



10x4 mm
MD021004S130



10x8 mm
MD021008S130



10x10 mm
MD021010S130



15x6 mm
MD021506S130

FISHER CONE

LET OP! Maten zijn van de lis. Niet van het biopt.



08x16 mm
MD030816T152



13x10 mm model B
MD041310B150



15x07 mm model B
MD041507B150



15x10 mm
MD031510T152



18x10 mm model B
MD041810B150


FISHER CONE

ELECTRODE BAL

MESVORMIG



20x10 mm
MD032010T152

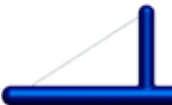

20x13 mm
MD032013T152



3 mm
MD0103130GY



5 mm
MD0105130GY



150 mm
MDN2152GY

MD CERVIXNAALD

MD Cervixnaald voor lokale anesthesie van de portio met extra lange (9 cm) verstevigde schacht tegen knikken. Te gebruiken met knikcarpulespuit en 1,8 ml ampul verdovingsvloeistof.

artikelnr.	omschrijving
600120	MD Cervixnaald, lengte 9 cm., met verstevigde schacht
600121	MD Knikmodel reusable carpulespuit 1,8 ml. Verpakt per stuk
600122	MD disposable carpulespuit 1,8 ml, steriel. Verpakt per stuk



Knikmodel reusable



Disposable



ENDOMETRIUM CURETTE EXPLORA

De Explora (3mm) wordt gebruikt om duidelijk gedifferentieerd endometriumweefsel te verkrijgen, meestal zonder verdoving, in een poliklinische setting.

De flexibiliteit van de nylon Explora, de kleine diameter en de scherpe Randall-Type snijrand geven zeer goede monsters van alle plaatsen van de endometriumholte inclusief de moeilijk te bereiken plaatsen. Het afgeronde einde van de Explora minimaliseert het risico op perforatie.



artikelnr.	omschrijving
MX120	Endometrium Curette Explora model 1

WIDE SEAL / ANTICONCEPTIEPESSARIUM

artikelnr.	omschrijving
WS60	MD Wideseal anticonceptie 60 mm
WS65	MD Wideseal anticonceptie 65 mm
WS70	MD Wideseal anticonceptie 70 mm
WS75	MD Wideseal anticonceptie 75 mm
WS80	MD Wideseal anticonceptie 80 mm
WS85	MD Wideseal anticonceptie 85 mm
WS90	MD Wideseal anticonceptie 90 mm
WS95	MD Wideseal anticonceptie 95 mm



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hypoallergeen, siliconen tussenschot met een unieke brede afsluiting
- Autoclaveerbare passet
- Acht maten voor juiste pasvorm
- Vervormt niet en is cadmiumvrij

LATEX-VRIJ

COMFI (IUD) THREAD RETRIEVER

De Comfi thread retriever is ontworpen om snel en gemakkelijk een niet vindbare spiraaldraad te lokaliseren en kan ook worden gebruikt om te bepalen of een IUD in de baarmoeder aanwezig is. De Comfi thread retriever heeft zeven specifiek ontworpen inkepingen op intervallen van 10 mm (aan elke kant), gecombineerd met een lange steel. Dit zorgt voor meer controle en optimaal ophalen van de IUD draden.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Duim uitsparing voor betere grip en controle
- Flexible steel met gladde ronde tip om makkelijk in de uterus te komen
- Zeven 10 mm interval inkepingen voor het makkelijk pakken van de IUD draden
- Lange steel (245 mm) voor gebruiksgemak

artikelnr.	omschrijving
D524-25	Comfi thread retriever doos à 25 stuks
D524	Comfi thread retriever folie à 5 stuks



ENDOCELL ENDOMETRIUM BIOPTEERSYSTEEM



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Uitstekende zuigkracht!
- Geen dilatatie nodig in de meeste gevallen, door de kleine diameter 3,1mm!
- Gemakkelijke plaatsing door flexibele schacht
- Minder ongemak, bloeding, weefselafscheiding dan bij D&C methode
- Met afstand indicator voor veiligheid en precisie
- Snelle set-up, korte procedure
- Kosten effectief
- Verkrijgbaar in kleine aantallen

artikelnr.	omschrijving
908015	Endocell, endometrial sampling (steriel)

Met de Endocell bieden wij een prijsgunstig, gebruiksvriendelijk en veilig hulpmiddel voor het vroegtijdig screenen van endometrium carcinoom. Met behulp van manuele zuigkracht kan in enkele seconden een histologisch monster van het baarmoederslijmvlies worden verkregen. Tevens kunt u met de Endocell de resultaten van hormonale therapie monitoren en het is een waardevol diagnostisch hulpmiddel bij fertiliteitsproblemen en uterine pathologie. De endocell kan gebruikt worden voor biopsie van het endometrium en voor menstruele extracties.

WALLACH CRYO APPARATUUR LLCO2 SYSTEM

Uitstekende vriesmogelijkheden met grote selectie van steriliseerbare cryochirurgietips.

Er zijn geen "O" ringen om te verwisselen!

Met een directe aansluiting op een CO₂ gasfles of op een console ontwerp.

Gemakkelijk in gebruik

Veiligheidsfeatures

5 jaar garantie

Te gebruiken met medisch CO₂ gas

Lichtgewicht,
uitgebalanceerd handvat




artikelnr.	omschrijving
900160	LLCO2 Cryosurgical System – CO ₂ (Freezer Only)
901011	Cart voor Cylinder
900221AA	Disposable Plastic Shields for Cryo Tips (100 per zak)

PELICAN DILATATORS



PELICAN DILATATOR

De Pelican dilatator is ontworpen om voorzichtig het ostium te dilateren om toegang tot de baarmoeder te vergemakkelijken. De Pelican dilatator loopt taps toe van 1 mm tot 8 mm (bij gebruik van de drie verschillende devices).

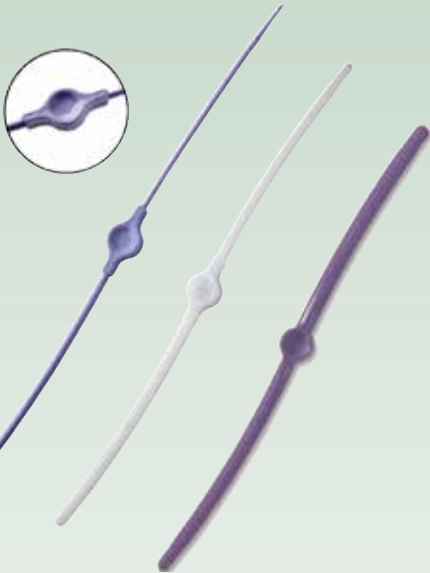

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sterk en in flexibel gegoten plastic
- Centraal duimgat voor gebruiksgemak
- Taps toelopende uiteinden voor geleidelijke dilatie
- Gladde afgeronde tips voor minder risico op perforatie

PELICAN UTERIENE SOUND-DILATATOR

De Uteriene Sound-Dilatator is een sterke maar flexibele, single-use, dubbel einde device, ontworpen voor voorzichtige dilatie van de cervix en om de diepte van de uterus te beoordelen.

De gladde en afgeronde uiteinden zijn speciaal ontworpen om een geleidelijke verwijding van de baarmoederhals mogelijk te maken en het risico op perforatie te verminderen.

- Voor het plaatsen van spiraaltjes
- Gladde afgeronde tip voor minder risico op perforatie
- Duidelijke diepte indicatoren van 1 cm tot 27.7 cm lengte met een maximum diameter van 5.5 mm




artikelnr.	omschrijving
400342	MD Pelican Cervix dilatator 3/4mm
400344	MD Pelican Cervix dilatator 5/6mm
400347	MD Pelican Cervix dilatator 7/8mm
410100	Uteriene Sound Dilatator

MD CERVIX DILATATOR

OS Finder Quick en Slow:

De disposable OS Finders van Medical Dynamics zoekt en opent op natuurlijke wijze het cervicale kanaal. Ideaal voor cervicale dilatatie, uterien sounding en intra-uteriene procedures.

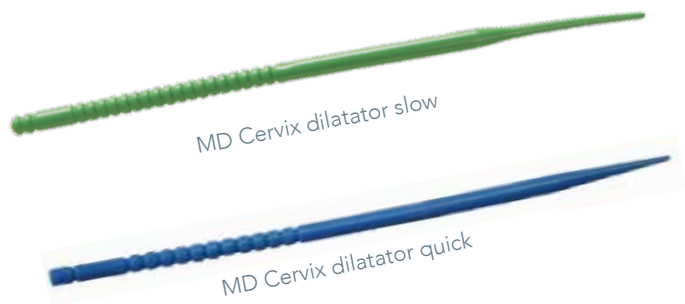

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Steriel verpakt
- Gemaakt van soepel en buigbaar plastic
- Per stuk verpakt
- Disposable zorgt voor het reduceren van de kosten van sterilisatie

artikelnr.	omschrijving
600150	MD Cervix dilatator slow
22731	MD Cervix dilatator quick

WORD BARTHOLIN KATHETER

De Word Bartholin Katheter wordt gebruikt bij de behandeling van abcessen aan de klier van Bartholin. De Bartholin Katheter bevat naast de katheter een spuit, naald en een scalpel.

artikelnr.	omschrijving
600130	Word Bartholin Katheter



SONOHYSTEROGRAFIE EN HYSTEOSALPINGOGRAFIE


H/S ELLIPTOSPHERE™

CooperSurgical

Het veilige en simpele antwoord voor
SONOHYSTEROGRAFIE en **HYSTEOSALPINGOGRAFIE**

PRODUCTEIGENSCHAPPEN


- Gepatenteerde Elliptosphere ballon geeft complete controle met minimale patiënten discomfort
- De contouren en het volume van de ballon zorgen voor een nauwkeurige plaatsing in het cervicale kanaal of uterine cavum voor optimaal zicht
- De katheter kan gebruikt worden met olie en zoutoplossing als contrastvloeistof
- Latex-vrij
- Door de dunne katheter kan het geplaatst worden naast de ultra sounddevice

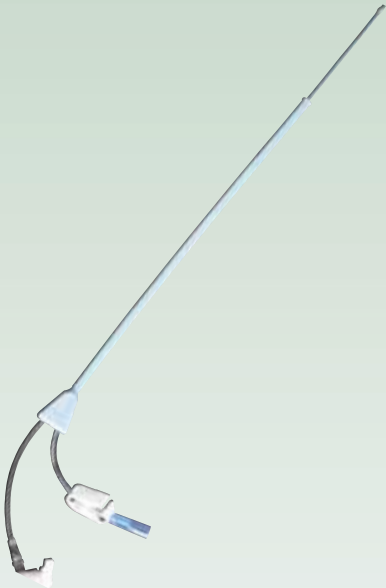

artikelnr.	omschrijving
61-4005	H/S Elliptosphere katheter

MD SIS KATHETER

De MD SIS Katheter is een gunstig geprijsde katheter welke de portio goed afsluit d.m.v. een conus. De binnenschacht is opschuifbaar, zodat de vloeistof makkelijk in het cavum gebracht kan worden. Voor de echo kan de SIS katheter volledig uit het zicht getrokken worden.

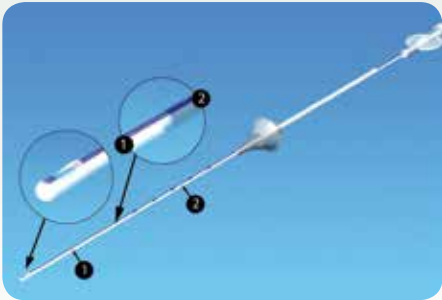

artikelnr.	omschrijving
770314	MD SIS katheter

endosee®ADVANCE

See now. Know now.™

Optimaliseer de patiëntenzorg in uw polikliniek



Direct beeldvorming van het endometrium¹




Efficiëntere workflow van onderzoeken in uw polikliniek en minder interventies in de operatiekamer^{2,3}



Lage investering die vanuit hysteroscopie wordt vergoed³



endosee®ADVANCE

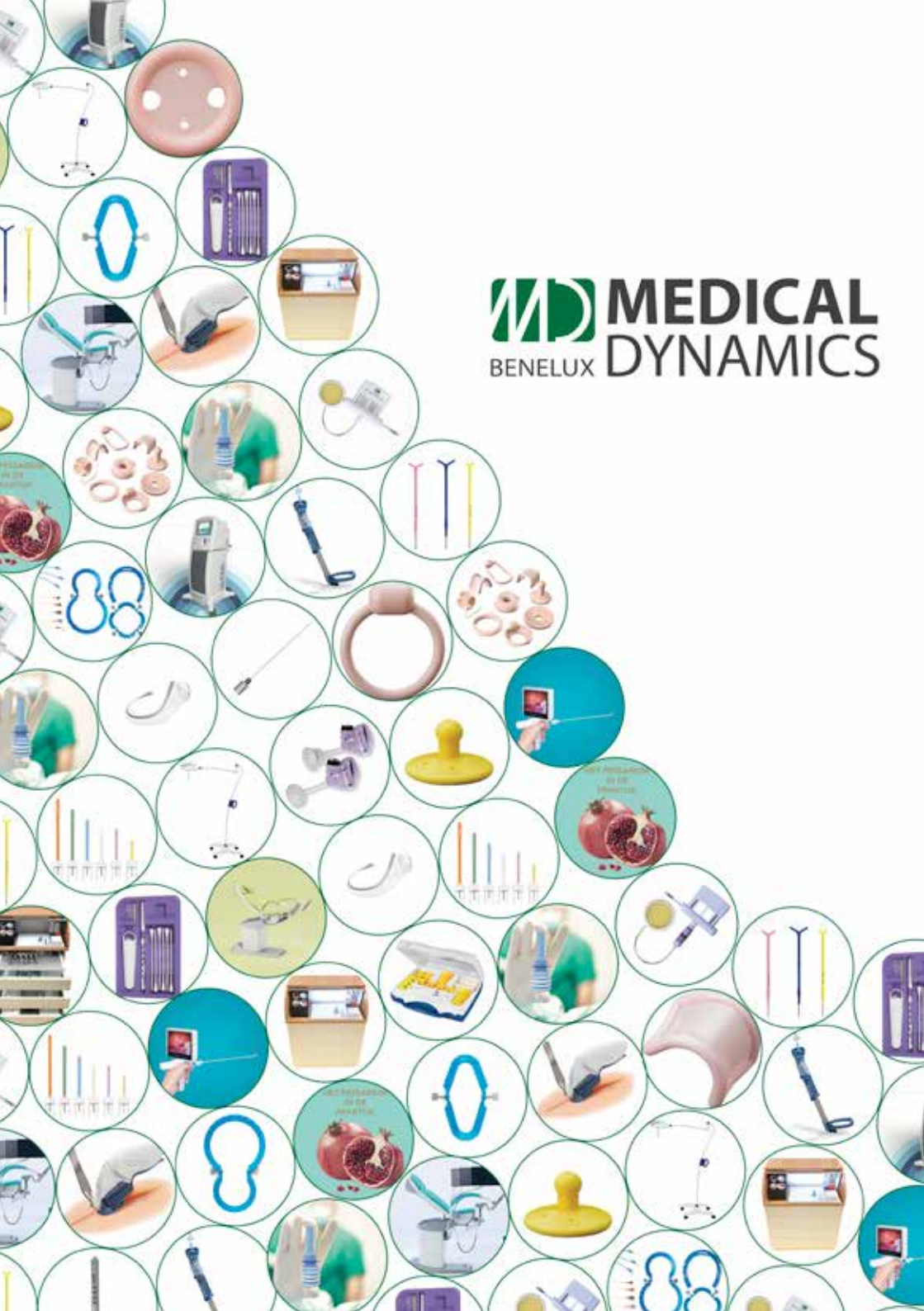

MEDI -MATIC ONDERZOEKS- EN BEHANDELSTOEL



MEDI-MATIC

DE JUISTE ONDERZOEKS- EN BEHANDELSTOEL VOOR GYNAECOLGIE,
UROLOGIE EN PROCTOLOGIE!



reddot design award

DE SCHMITZ STOEL STAAT IN MEER DAN 80% VAN DE NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN !

SCHMITZ STOEL MET GEÏNTEGREERDE COLPOSCOOP



VIDAN®2

PRODUCTEIGENSCHAPPEN MEDI-MATIC EN VIDAN®2

- Digitale colposcoop (alleen op Vidan®2)
- Modern design aangepast aan ergonomische eisen
- Elektrisch verstelbare voetsteunen
- Elektrisch verstelbare hoogte, stoel- en rugleuning
- Snelle aanpassing van positie binnen een paar seconden
- Alle functies zijn te bedienen met de handbediening
- Bespaar tijd en meer comfort door de geheugenfunctie en gelijktijdige beweging van de aandrijfmotor
- Een lage startpositie om de patiënt eenvoudig te laten plaatsnemen
- Gemakkelijk afneembare beensteunsystemen
- Optioneel: instelbare stoelverwarming, zorgt voor extra comfort voor de patiënt!
- Gemakkelijk schoon te houden, zeer hygiënisch
- In veel kleuren beschikbaar!
- Hefgewicht tot 200 kg

Bekijk
uitgebreide
Schmitz
catalogi



MEUBILAIR SPREEK- EN ONDERZOEKSKAMERS

Voor het meubilair in de spreek-en onderzoekskamers van de poli gynaecologie en urologie werkt Medical Dynamics samen met twee vooraanstaande fabrikanten.

Ons medisch meubilair, zoals o.a. de MD10 GYNOKAR en MD20 aflegunit voor gebruikt instrumentarium, worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd, waardoor wij volledig aan al uw wensen en eisen tegemoet kunnen komen. Wilt u bijvoorbeeld een extra lade? Andere afmetingen? Of wilt u nieuwe of uw bestaande apparatuur laten inbouwen? Geen probleem! Bij Medical Dynamics is het mogelijk!

Naast het Medical Dynamics meubilair beschikken wij ook over een uitgebreid programma metalen meubilair van fabrikant Schmitz.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Dan is onze accountmanager graag bereid een afspraak met u in te plannen.



bekijk
uitgebreide
Schmitz
catalogi



MD10-MD20-MD30 / INSTRUMENTEN UNITS

INSTRUMENTENUNIT MD10

De MD10 is een compacte verstelbare instrumentenunit, uitgevoerd in multiplex met ronde afdekkap om uw materialen stofvrij onder op te bergen. De MD10 is zeer geschikt voor onderzoekkamers waar de beschikbare ruimte beperkt is.

Voor een optimaal gebruiksgemak is de unit onder het bovenblad voorzien van een hoge open ruimte met daarin een uittrekbare instrumentenschaal met indeling. Tevens treft u hier een perspex houder voor wattenstokjes, spatels e.d. aan.

Om infectiegevaar en besmetting van schoon instrumentarium te voorkomen hebben wij de units voor schoon en gebruikt instrumentarium (MD20) van elkaar gescheiden. De MD20 is voorzien van Scan Module bak (30x40cm).

INSTRUMENTENUNIT MD20

De MD20 is een verstelbare unit voor de afleg van gebruikt instrumentarium en voor de afleg van klein afval. Deze unit is gemaakt van multiplex. Onder de ronde kap kunt u het gebruikte instrumentarium in een scan-module bak (30x40cm) afleggen.

Onderin heeft u een lade die voorzien is van een schopmechanisme, waarin u klein afval kunt deponeren. Het schopmechanisme maakt het mogelijk dat u wattenstokjes, gaasjes e.d. kunt weggoien zonder de unit aan te raken.

INSTRUMENTENUNIT MD30

De MD30 is een verstelbare unit waarin de aanwezige of nieuw te leveren liseexcisieapparatuur alsmede een geïntegreerde rookafzuiger is ingebouwd. De apparatuur is via electronica dusdanig geschakeld dat de rookafzuiger aangaat zodra de coagulatieapparatuur wordt bediend. De nalooptijd van de rookafzuiger is instelbaar tot continue afzuigen. Tevens heeft u opbergmogelijkheden voor al uw disposables en accessoires.





We make it visible

PICO FULL HD 1080P MET DUURZAME LED VERLICHTING

De Zeiss PICO Full HD voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen van een colposcoop. De PICO is verkrijgbaar met een plafondstatief en in een verrijdbare uitvoering. Deze mooi gestileerde colposcoop biedt u een hoog gebruiksgemak en geeft optisch glashelder beeld. De fijnfocusering en verdere verstelbaarheid zijn op de gebruiker afgesteld.

Met de ingebouwde full HD 1080 videocamera (optioneel) en een monitor aan de zuil heeft u een compacte videocolposcoop welke goed naar diverse kamers verreden kan worden. Het koppelen aan een digitaal beeldopslagsysteem in het ziekenhuis informatiesysteem is eenvoudig te realiseren, door de ethernetpoort rechtstreeks te koppelen aan het ziekenhuis netwerk.

Door de duurzame LED technologie is het vervangen van een LED lamp niet meer nodig! Naast de PICO full HD heeft ProFem verschillende colposcopen in het assortiment.



MACH / LED ONDERZOEKSLAMPEN

COMPACTE ONDERZOEKSLAMP MET INNOVATIEVE LED-TECHNOLOGIE

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 70000 LUX.
- Kleurweergave index Ra 95 .
- Lichtveldgrootte 14-25 cm.
- Lampdiameter 33 cm.
- 19 LED's.
- Focuseerbaar.
- Met lichte swingarm.



artikelnr.	omschrijving
1304201300	Dr. Mach onderzoekslamp 130F LED met focusering, op statief, hoogte verstelbaar 60-177cm, zwenkradius 85cm
1304202202	Dr. Mach onderzoekslamp 130F LED met focusering Wandbevestiging met swingarm
1304203330	Dr. Mach onderzoekslamp 130F LED met focusering Plafondbevestiging met swingarm

CHIRURGIE / ENDOSCOPIE

QUICK-KIT

Volledig disposable kit:

- Rotorkabel
- Handstuk
- MorSafe weefselisolatiezak

MAAKT MORCELLEREN NOG VOORDEELIGER!





4DryField® PH

Wereldwijd uniek: CE-gecertificeerd en klinisch bewezen



ANTI-ADHESIE & HEMOSTASE MIDDEL IN ÉÉN!

4DryField® PH

De 4DryField® PH is te gebruiken bij laparoscopische en open chirurgie. Het is een anti-adhesie en een hemostase middel in één.

Door de combinatie *anti-adhesie*, *hemostase* en een *lage prijs* is het multi-disciplinair op de OK te gebruiken!

4DryField® PH bestaat uit hydrofiele micropartikels die zijn gemaakt uit gezuiverd, plantaardig zetmeel. Door zijn vloeiditeit kan de stof eenvoudig en veilig worden aangebracht tijdens operatieve ingrepen. 4DryField® PH bevat geen dierlijke of menselijke deeltjes.

4DryField® PH is gesteriliseerd, pyrogeenvrij en volledig biocompatibel.

WERKING ANTI-ADHESIE:

Door de bijzondere moleculaire structuur van 4DryField® PH zetten de hydrofiele micropartikels zich bij vloeistofopname uit tot een gel. Voor adhesieprofylaxe wordt 4DryField® PH door het bedruppelen met een isotonische zoutoplossing omgezet in gel.

De gel werkt als tijdelijke, mechanische barrière, die chirurgisch getraumatiseerde, mesotheliale (of mesotheel-achtige) vlakken (risicozones voor de vorming van adhesies) scheidt.

4DryField® PH als gel wordt binnen enkele dagen afgebroken door amylase en glucoamylase.

WERKING HEMOSTASE:

Door het absorberen van vloeistof veroorzaakt 4DryField® PH een relatieve concentratie van de eigen stollingsfactoren van de patiënt, wat resulteert in veilige en snelle hemostase.

Zelfs met een 50% verdunning van het bloed, vertoont het door 4DryField® PH geïnduceerde coagulum uitstekende stabiliteit.



ANTI-ADHESIE & HEMOSTASE MIDDEL IN ÉÉN!

PLASMAJET ULTRA+/ ENERGIEDEVICE



Het PlasmaJet Ultra+ systeem is een operatie techniek met zuivere plasma (zonder elektrische stroom). Voor dissectie, snijden, ablatie en coagulatie bij laparoscopische en open chirurgie. Het is zeer geschikt voor o.a. cytoreductie, lymfadenectomie, darm-, long-, endometriosechirurgie en adhesiolyse. Thermische spreiding is minimaal (0,2 mm) hierdoor kan er precies en rondom delicaat weefsel geopereerd worden. Het is een geavanceerd chirurgiesysteem zonder elektrische stroom door de te geleiden. De PlasmaJet Ultra+® is elektrisch neutraal en geeft geen vonkbogen naar instrumenten of vloeistoffen in het operatiegebied. Tevens zal de PlasmaJet Ultra+® niet tot spiersamentrekkingen of onbedoelde brandplekken leiden.



“ Het belangrijkste voordeel van de PlasmaJet Ultra+® is het vermogen om snel en eenvoudig weefselvlakken te scheiden met behulp van de thermische en kinetische energie van het apparaat.”

— Horace Roman, Professor, surgeon, Endometriosis Center, Clinique Tivoli-Ducos, Bordeaux, Frankrijk



Het PlasmaJet Ultra+ systeem bestaat uit een console die op een werktrolley is bevestigd. Aan de console kunnen een reeks disposable handstukken gekoppeld worden voor eenmalig gebruik voor open en laparoscopische chirurgie.

**“...take the bad
leave the good.”**



AFSTAND MAAKT HET VERSCHIL

Hoe verder de tip van het handstuk zich van het weefsel af bevindt, hoe meer de plasma-energie verspreid raakt, waardoor de veelzijdige PlasmaJet Ultra+ kan worden gebruikt om te snijden, vaporiseren, coaguleren en weefsels te scheiden.




SNIJDEN (~0-3 mm)

Het apparaat heeft een nauwkeurig snij-effect op het doelweefsel door zeer gerichte energie van de tip van het handstuk.



VAPORISEREN (~3-5 mm)


Hoe verder het handstuk van het doelweefsel af wordt gehouden, hoe minder geconcentreerd de energie is, waardoor gecontroleerde ablatie van laesies mogelijk is.

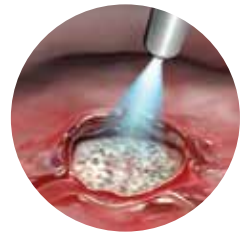

COAGULEREN (~5-15 mm)

Door het handstuk nog verder weg te houden, wordt de energie nog meer verspreid, wat effectieve coagulatie van een bloedend gebied mogelijk maakt.

Met behulp van de kerneigenschappen van de PlasmaJet Ultra+ op het gebied van snijden, vaporiseren en coaguleren is het apparaat in staat zeer nauwkeurig weefselvlakken van elkaar te scheiden (dissectie). Dit belangrijke weefseleffect wordt geholpen door de kinetische energie die het plasma heeft.

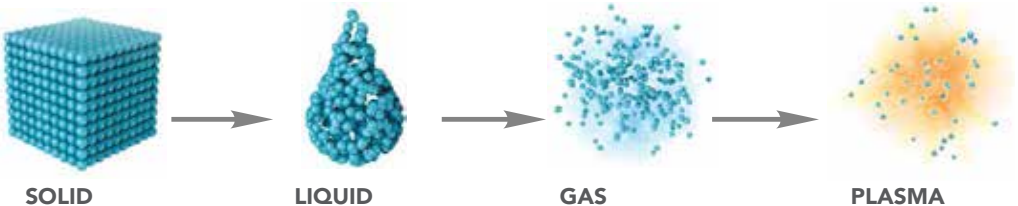

CooperSurgical

INSORB® Skin Stapler
Absorbable | Subcuticular

Redefining Optimal Skin Closure

INNOVATIEF HECHTSYSTEEM!



ZEER GOED COSMETISCH RESULTAAT VAN DE INSORB RESORBEERBARE SKIN STAPLES BIJ EEN KEIZERSNEE!

BIJ OPERATIE



NA DRIE WEKEN



HET SNELLE SKIN CLOSURE SYSTEEM!

Steriel verpakt, single use en één device bevat 30 'staples' om 21 centimeter mee te hechten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Resorbeerbare 'staples'
- Hecht subcutaan. Geen onnodige percutane beschadigingen
- Geen consult om de nietjes te verwijderen
- Reduceren OK tijd
- Verbetert comfort en cosmetisch resultaat
- Reduceert post-operatieve pijn na een keizersnee²
- Geen hechtingen
- Minder wondcomplicaties t.o.v. metalen 'staples'³

Bekijk instructievideo's
en gebruiksaanwijzing




MateRegen® Gel
Self cross-linked hyaluronan gel

CROSSLINKED HYALURONZUUR TER VOORKOMING VAN
INTRA UTERINE ADHESIES

- **Mechanisch barrière middel**
- Voorkomt intra-uteriene verklevingen en littekens
- Zorgt voor endometrium regeneratie
- Controle op minimaal bloedverlies
- Optimale viscositeit en gecontroleerde absorptie

HOOGRISICO OPERATIES / INTRA-UTERIENE ADHESIES

- 1e curretages
- Herhaalde curretages
- Asherman Syndroom
- Resectie van myomen
- Uteriene septum
- Hysteroscopische chirurgie

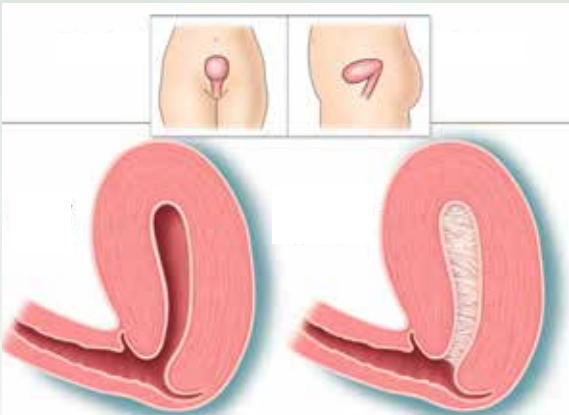

UNIEKE PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Eenvoudig in gebruik met flexibele canule om de gel in het cavum aan te brengen
- 'Non-animal-sourced' hyaluronzuur
- Vermijdt mogelijke reacties van xenogene proteïnen
- Blijft tot 14 dagen ter plaatse
- Bedekt het slijmvlies gedurende de kritieke helende periode

artikelnr.	omschrijving
40-008-005	MateRegen Gel (1 spuit van 5cc)
40-008-010	MateRegen Gel (10cc, 2 spuiten van 5cc)

TOTAALCONCEPT : ALLY UPS - Uterien positioneer syteem

Bekijk
instructievideo



ALLY UPS® - Uterien Positioneer Systeem



Voor verschillende indicaties de juiste
uterus manipulator

Houdt rekening met de persoonlijke
voorkeur van de operateur


Houdt rekening met de situatie in uw
ziekenhuis



RUMI II




ALLY UPS
adapter drape

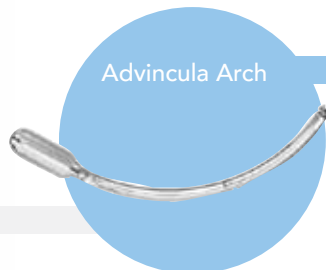

Advincula Arch



ALLY UPS
delineator
adapter drape

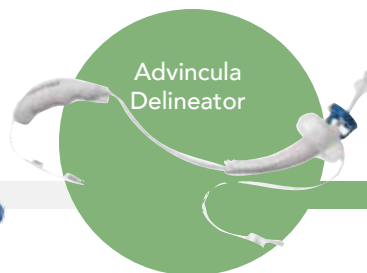

Advincula
Delineator

Uteriene tips



Atraumatisch voor het endometrium

Koh-efficient




Bij TLH/LSH/LAVH met de RUMI II

Koh-efficient



Bij TLH/LSH/LAVH met de Advincula Arch

Sacrocolpopexie tips

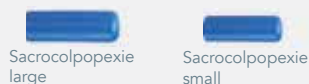

Bij vaginale prolaps chirurgie zonder cervix

Sacrocolpopexie tips



Bij vaginale prolaps chirurgie met cervix

Hoyte sacrocolpopexie tips



Bij vaginale prolaps chirurgie zonder cervix

Hoyte sacrocolpopexie tips



Bij vaginale prolaps chirurgie met cervix

Disposable manipulator met geïntegreerde Koh-efficient



Ideaal voor TLH/LSH/LAVH

CooperSurgical

ALLY UTERIEN POSITIONEER SYSTEEM



ALLY UTERIEN POSITIONEER SYSTEEM (UPS)

CONTROLE OVER DE ANATOMIE TIJDENS
GYNAECOLOGISCHE LAPAROSCOPISCHE
PROCEDURES



De ALLY UPS biedt uitzonderlijke controle, waardoor u meer exposure en een beter zicht creëert tijdens alle GYN laparoscopische procedures. Van Myomectomie, tot TLH en zelfs Sacrocolpopexy, met de ALLY UPS verhoogt u de efficiëntie.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Houdt de uterus nauwkeurig op de gewenste positie voor optimale visualisatie, bereikbaarheid en patiëntveiligheid
- Geen assistentie nodig om de uterus - manipulator vast te houden
- Voetpedaal om de uterus manipulator eenvoudig en snel te ontkoppelen
- Past op elke operatietafel
- Weinig werkruimte nodig
- Een musthave bij gebruik van een Da Vinci Robot!

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ALLY UPS cart
- Deze unieke cart is speciaal gemaakt om de ALLY direct naar de OK tafel te brengen.
 - Voor het snel en veilig opzetten en opruimen van de ALLY UPS



artikelnr.	omschrijving
AUUPS	ALLY uterine positioning system
AUCART	ALLY uterine positioning system cart
AUAD	Adapter drape for RUMI II and Advincula Arch
AUADDLNTR	Adapter drape for Advincula delineator
UMH650	RUMI II uterine manipulator handle
UMH750	Advincula Arch uterine manipulator handle

CooperSurgical

DELINEATOR / DISPOSABLE UTERUS MANIPULATOR

GEAVANCEERDE UTERUS MANIPULATOR

Advincula
DELINEATOR™
with Koh-Efficient® Technology



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Zeer gebruiksvriendelijk
- Direct klaar voor gebruik
- Efficiënt disposable design
- Veilig
- Sterk voor TLH, LSH en LAVH

De steel is van zeer sterke kwaliteit

Position lock vereenvoudigt het op de juiste lengte inbrengen van de manipulator

Best-in-Class pneumo occluder ballon

cm markering verschijnt aan distale- en proximale eind

Uteriene ballon

Stugge koh colpotoomie cup voor een duidelijke lijn op de vaginale fornix bij craniale druk

Ergonomisch handvat, comfortabel gedurende de hele procedure

artikelnr.	omschrijving
AD750KE25	Advincula Delineator 2.5cm Ultem Plastic cup
AD750KE30	Advincula Delineator 3.0cm Ultem Plastic cup
AD750KE35	Advincula Delineator 3.5cm Ultem Plastic cup
AD750KE40	Advincula Delineator 4.0cm Ultem Plastic cup

artikelnr.	omschrijving
AD750KES25	Advincula Delineator 2.5cm Stainless Steel cup
AD750KES30	Advincula Delineator 3.0cm Stainless Steel cup
AD750KES35	Advincula Delineator 3.5cm Stainless Steel cup
AD750KES40	Advincula Delineator 4.0cm Stainless Steel cup

Bekijk
instructievideo



RUMI II SYSTEEM / UTERUS MANIPULATOR

VERBETERDE VISUALISATIE EN CONTROLE
BIJ LAPAROSCOPISCHE PROCEDURES



uniek "lock" systeem voor
totale controle van de uteriene
positie



Atraumatische tip met
siliconenballon



artikelnr.	omschrijving
UMY514	RUMI II tip geel, 5.1mm x 3.75cm
UMY516	RUMI II tip lavendel, 5.1mm x 6cm
UMW676	RUMI II tip wit, 6.7mm x 6cm
UMB678	RUMI II tip blauw, 6.7mm x 8cm
UMG670	RUMI II tip groen, 6.7mm x 10cm
UMO672	RUMI II tip oranje, 6.7mm x 12cm

Het Rumi II systeem is een zeer effectieve, veilige uterus manipulator. Voor elke laparoscopische of robot geassisteerde bekkenbodemp operatie. Chirurgen zullen superieur visueel beeld en controle van de uterus ervaren. En een betere bereikbaarheid van het bekkenbodengebied. Mogelijkheid om 140 graden lateraal te bewegen vanaf de cervix.

De Rumi II disposable intrauterine tips zijn verkrijgbaar in 6 maten. Gemaakt van flexibele siliconen. De Rumi II heeft een zachte flexibele distale eind om uteriene perforatie en trauma te voorkomen. De sterke tip met flexibiliteit geeft de mogelijkheid om de intrauteriene ballon te vullen met zoutoplossing. Ongeëvenaarde duurzaamheid.

Bekijk
instructievideo





artikelnr.	omschrijving
KCRUMI25	RUMI II / Koh-efficient, 2.5cm
KCRUMI30	RUMI II / Koh-efficient, 3.5cm
KCRUMI35	RUMI II / Koh-efficient, 3.5cm
KCRUMI40	RUMI II / Koh-efficient, 4.0cm

artikelnr.	omschrijving
CPO6	Colpo-pneumo occluders, sterile, single use

artikelnr.	omschrijving
KCSRUMI25	Stainless steel capped RUMI II / KOH-efficient, 2.5cm
KCSRUMI30	Stainless steel capped RUMI II / KOH-efficient, 2.5cm
KCSRUMI35	Stainless steel capped RUMI II / KOH-efficient, 2.5cm
KCSRUMI40	Stainless steel capped RUMI II / KOH-efficient, 2.5cm

artikelnr.	omschrijving
KCP302	Ultem Koh cup, two nonsterile, 3cm
KCP352	Ultem Koh cup, two nonsterile, 3.5cm
KCP402	Ultem Koh cup, two nonsterile, 4.0cm

artikelnr.	omschrijving
KCS30	Stainless steel Koh cup, two nonsterile, 3cm
KCS35	Stainless steel Koh cup, two nonsterile, 3.5cm
KCS40	Stainless steel Koh cup, two nonsterile, 4.0cm



De met zoutoplossing te vullen ballon zorgt voor stevige houvast voor superieure manipulatie



De gemakkelijk te belasten Koh- efficiënt is ontwikkeld voor gemakkelijke introductie/ insertie



De Koh- efficiënt biedt een perfecte "landmark" voor dissectie




artikelnr.	omschrijving
KCsizer	Cervical sizer

CERVICAL SIZER

Met de speciaal ontwikkelde "Cervical Sizer" gaat het opmeten van de cervix zeer eenvoudig en snel. Het geeft een duidelijke beschrijving van de vaginale fornix. Gebruik de "Cervical Sizer" om accuraat de juiste maat Koh- efficiënt te kiezen afhankelijk van de anatomie van de patiënt.

ADVINCULA ARCH / UTERUS MANIPULATOR

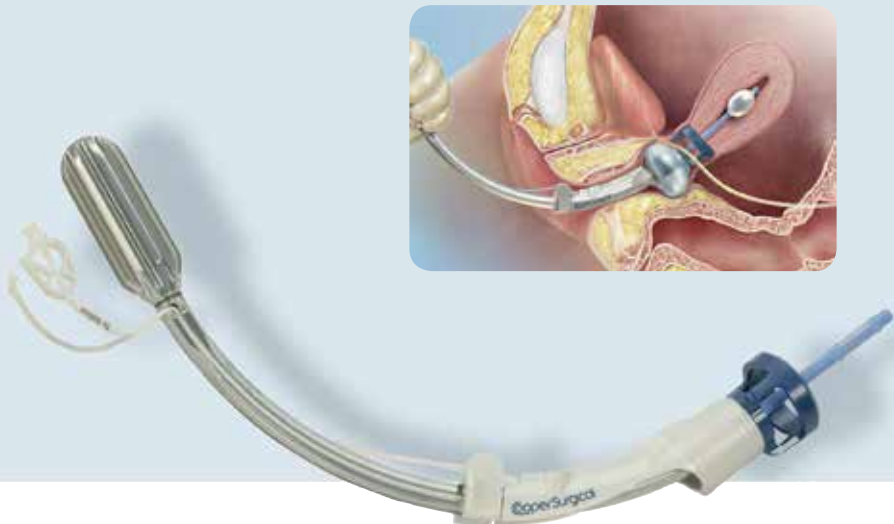

“De Advincula Arch is an innovative uterine manipulator. When combined with the Arch Koh-efficient it provides ease of use and functionality during all the critical stages of a TLH”

—Arnold Advincula, MD—

Als alternatief voor de scharnierende werking van de Rumi II is de Advincula Arch ideaal voor specialisten die een sterke uterus manipulator zoeken. Anteversie en retroversie kan handmatig gedaan worden. Gemakkelijk insertie vanuit elke hoek. De unieke bocht geeft een uitstekende hoogte voor uitstekende visualisatie en controle.

artikelnr.	omschrijving
UMH750	Advincula Arch Uterine Manipulator Handle

artikelnr.	omschrijving
	Voor Electrochirurgie
KCARCH25	Utem plastic Arch Koh-efficient, 2,5cm
KCARCH30	Utem plastic Arch Koh-efficient, 3,0cm
KCARCH35	Utem plastic Arch Koh-efficient, 3,5cm
KCARCH40	Utem plastic Arch Koh-efficient, 4,0cm

artikelnr.	omschrijving
	Voor Harmonic Scalpel/Laser
KCSARCH25	Stainless steel capped Arch Koh-efficient, 2.5cm
KCSARCH30	Stainless steel capped Arch Koh-efficient, 3.0cm
KCSARCH35	Stainless steel capped Arch Koh-efficient, 3.5cm
KCSARCH40	Stainless steel capped Arch Koh-efficient, 4.0cm



Bekijk
instructievideo



ADVINCULA ARCH / UTERUS MANIPULATOR



Sacrocolpopexie en sacrocervicopexie tips

Het plaatsen van matjes bij sacrocolpopexie kan lastig en tijdrovend zijn.
De sacrocolpopexie tip past op elk Rumi handvat. De tip kan de vagina heffen.
De blaas zit niet in de weg en hechten gaat een stuk gemakkelijker, omdat de tip zorgt dat het weefsel niet beweegt.

Met constante druk wordt migratie van weefsel geminimaliseerd gedurende het hechten van matjes.



artikelnr.	omschrijving
SACRO1	Sacrocolpopexy tip - large 1.5" x 4.5 (3.8cm x 11.4cm)
SACRO1S	Sacrocolpopexy tip - small 1.3" x 3.5 (3.2 cmx 9cm)
SACRO1C	Sacrocolpopexy tip - Concave distal en 1.5" x 4.5" (3.8

Sacrocolpopexie tip - Small Sacrocolpopexie tip - Large Sacrocervicopexie tip - Small Sacrocervicopexie tip - Large



artikelnr.	omschrijving
LHSCOLPOLRG	Hoyte sacrocolpopexy tip - large, single-use
LHSCOLPOSML	Hoyte sacrocolpopexy tip - small, single-use
LHCERVLRG	Hoyte sacrocervicopexy tip - large, single-use
LHCERVSMML	Hoyte sacrocervicopexy tip - large, single-use
UMH750	Advincula Arch uterine manipulator handle

SAM / STABLE ATRAUMATIC MANIPULATOR


DE DISPOSABLE DIAGNOSTISCHE UTERUSMANIPULATOR

De SAM is in 7 en 9 cm verkrijgbaar. De SAM is een volledig disposable uterus manipulator. De sonde scharniert tegen de cervix en geeft daarmee tijdens laparoscopische ingrepen de mogelijkheid om de uterus weg te draaien. Hierdoor creeërt u tijdens uw laparoscopische ingrepen in de bekkenbodem optimaal zicht. Ook geschikt voor dye test.

Voor volledige controle en het beste zicht gedurende laparoscopische gynaecologische operaties.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Veelzijdig
- Atraumatisch
- Zachte tip
- Zeer praktisch in gebruik

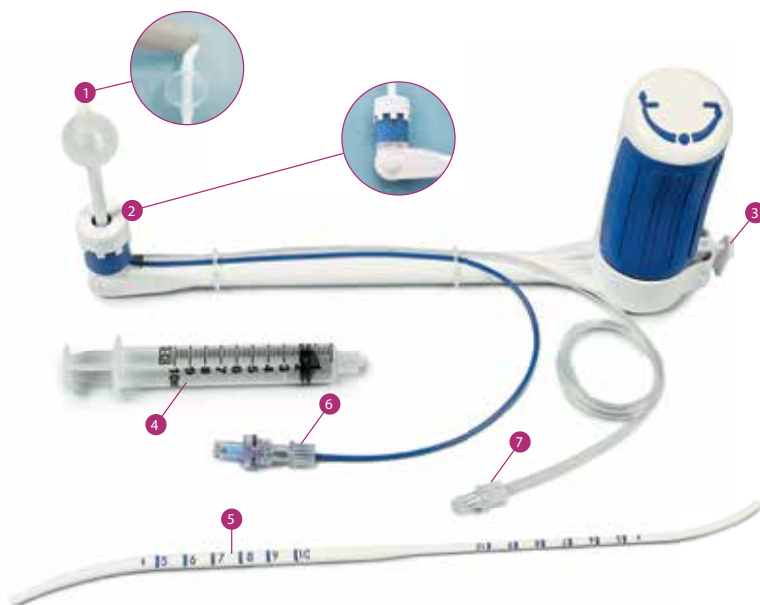

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Sonde met siliconen ballon (cuff) en
atraumatische tip | 4 Insufflatie spuit voor cuff |
| 2 Verwijderbaar in elkaar grijpend tussenstuk om
sondelengte te verkorten | 5 Sound dilatator |
| 3 Knop om sonde vast te zetten | 6 Connector voor dye test |
| | 7 Safety valve voor cuff |

ColpoWaveTM

Vaginal Delineator

SurgiToolsMIS.com

VOOR TLH EN SACROCOLPOPEXY

VOORDELEN:

- Volledig disposable uterus manipulator:
- Geen sterilisatiekosten
- Altijd een uterusmanipulator beschikbaar
- Kosteneffectief

Bekijk
video



Op de ColpoWave is een indicator zichtbaar om het snijpunt veilig te kunnen bepalen voor de colpotomie! Bij het opdrukken van de uterus wordt de urineleider verplaatst, zodat deze tijdens het doornemen niet beschadigt.

Draai de ColpoWave heen en weer voor duidelijke visuele oriëntatiepunten en fysieke veiligheidsmarges in alle fasen van de procedure.

VOOR ONCOLOGEN:




De 20 mm marge-indicatie geeft de marge aan voor radicale hysterectomie.

GEBRUIK ALS STANDALONE

- Verhoogde marges voor colpotomie en oncologie
- Twee colpotomie maten in één device
- Behoud van pneumoperitoneum
- Ook geschikt voor sacrocolpopexie


GEBRUIK MET CERVIGRIP

- Verstelbare tip, hierdoor geen noodzaak voor verschillende maten tips
- Veilige cervicale fixatie
- Voorspelbare afstand ureter en de uterus
- Vergemakkelijkt het verwijderen van de baarmoeder

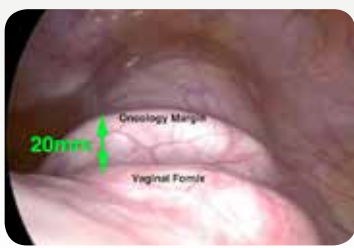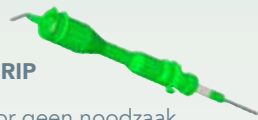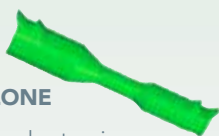

artikelnr.	omschrijving
CMS	Colpowave manipulator systeem bestaande uit: Colpotomizer, ColpoWave Balloon en CerviGrip Uterine Manipulator

LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

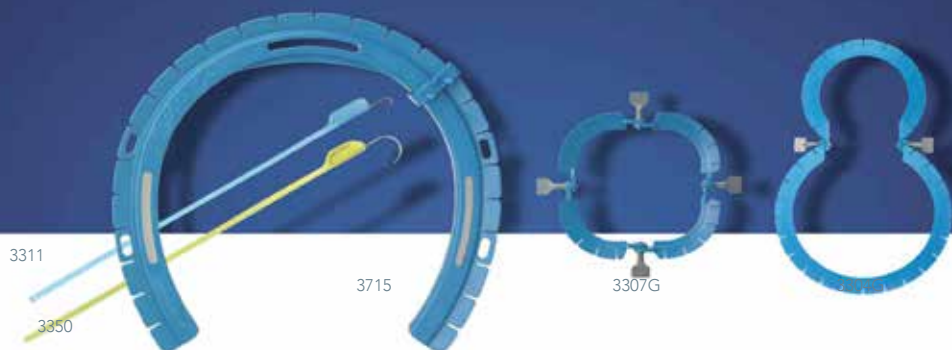

Met de Lone Star retractor kunt u weefsel eenvoudig op spanning brengen. Hierdoor is het te behandelen weefsel beter bereikbaar met uw instrumentarium en het geeft meer zicht in het operatiegebied. De Lone Star is voor verschillende chirurgische procedures ontwikkeld: Gynaecologie, Urologie, Colon- en rectale chirurgie, Hoofd- Hals chirurgie.

INDICATIES GYNAECOLOGIE:

- Reconstructieve bekkenbodembirurgie
- Plaatsen van Sub-urethrale slings
- Bekkenbodemb prolaps chirurgie
- Mesh excisions
- Reparatie fistula
- Vaginale hysterectomie
- Vaginale cystectomie
- Episiotomie reparatie



Bekijk
video



Specifiek voor de gynaecologie biedt de Lone Star APS Retractor het beste anatomische beeld voor onder andere reconstructieve bekkenbodembirurgie, obstetrische en vaginale chirurgie.

De elastieken met ultra-precieze haakjes houden een consistente traxi in stand.

Een variëteit aan stompe en scherpe haakjes zijn beschikbaar om naar wens te gebruiken bij diverse operaties.

LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

CooperSurgical

INDICATIES UROLOGIE:

- Urethraplastieken

INDICATIES COLORECTALE PROCEDURES:

- Reparatie anale fistel
- Rectale prolaps reparatie
- Reparatie sphincter letsel
- LAR/ Colostomose en anastomose
- Hirschsprung procedure

INDICATIES HOOFDHALS CHIRURGIE:

- Tracheostomie
- Lymfeklierbiopsie
- Mediane halscyste
- Parotidectomie
- Thyroidectomie

VOORDELEN LONE STAR RETRACTOR SYSTEEM:

- De beste onbelemmerde anatomische visualisatie van elk retractorsysteem
- OK personeel kan andere taken doen in de OK
- Geschikt voor verschillende chirurgische procedures
- Eenvoudig in gebruik
- Verschillende retractors en elastische haakjes verkrijgbaar



SIMPELE TECHNIEK IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN



Plaats de Lone Star retractoring om de te nemen of bestaande incisie. Steek elastische haakjes in het weefsel en trek ze terug in direct tegenoverliggende kwadranten. Gleuven op de ring zorgen voor eenvoudige plaatsing voor gelijke en constante spanning.



Naarmate de dissectie vordert, verplaatst u de elastische haakjes en voegt u indien nodig nieuwe toe om volledige, evenwichtige terugtrekking vanuit elke hoek te bereiken.



Plaats bij het sluiten de elastische haakjes langs de as van de incisie om spanning te creëren om een precieze niet- of hechtingplaat-sing te vergemakkelijken

Lone Star® disposable retractor ringen

De Lone Star ringen zijn gemaakt van Noryl hars. De disposable retractor ringen worden geleverd in steriele dubbele "peel-pouches" om het product gemakkelijk aan te bieden aan het chirurgische veld. De Lone Star ringen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten en zijn toepasbaar voor diverse operaties.

LONE STAR - RETRACTOR RINGEN

artikelnr.	omschrijving	
	LONE STAR DISPOSABLE RETRACTOR RINGS	
3301G	Surgical applications Retractor, sterile plastic, 25.3 cm x 11.3 cm	
3302G	Gynecology and Head and Neck Retractor, sterile plastic, 22.0 cm x 11.3 cm	
3304G*	Gynecology, especially narrow pelvis, obese Retractor, sterile plastic, 32.5 cm x 18.3 cm includes 2 each catheter clips	
3307G	Colon and Rectal Surgeries; also general surgery, head and neck Retractor, sterile plastic, 14.1 cm x 14.1 cm	
3308G*	Gynecology, Male Urology Retractor, sterile plastic, 28.3 cm x 18.3 cm	
3309G	Head and Neck, Pediatrics Retractor, sterile plastic, 18.6 cm x 8.9 cm	
3310G	General Surgery, Head and Neck Retractor, sterile plastic, 25.0 cm x 25.0 cm	
3715*	Gynecology APS retractor, sterile plastic, VELCRO backing 16.6cm x 16.6cm. includes 2 each catheter clips	

LONE STAR - ELASTISCHE HAAKJES

artikelnr.	omschrijving	
32058G	5 mm semi-blunt PRO-Stay, 8/pack	
33118G	5 mm sharp hook, 8/pack	
33148G*	3 mm sharp hook, 8/pack	
33168G*	5 mm blunt hook, 8/pack	
33254G	5 mm two-finger, 4/pack	
33274G	7 mm two-finger, 4/pack	
33294G	9 mm two-finger, 4/pack	
33304G	13 mm x 16 mm solid blade, 4/pack	
33314G	13 mm x 20 mm blunt, 4/pack	
33324G	14 mm x 16 mm two-finger, 4/pack	
33334G	14 mm x 20 mm two-finger, 4/pack	
33344G	20 mm x 16 mm four-finger, 4/pack	
33354G	20 mm x 20 mm three-finger, 4/pack	
33384G	6.5 mm x 16 mm solid blade, 4/pack	
33388G*	12 mm blunt hook, 8/pack	
33504LG	12 mm blunt hook, elongated lead, 4/pack	
33844	12 mm two-finger blunt hook, 4/pack	
35501G	12 mm blunt hook, dual lead, 50/case	

Elastische haakjes om snel aan te brengen. Groot aanbod in stompe en scherpe haakjes. In verschillende maten en materialen verkrijgbaar voor elk type chirurgie. De haakjes zijn single-use.

artikel-nr.	omschrijving
	LONE STAR RETRACTOR KITS
3704	Gynecology kit: each kit contains one disposable retractor, 32.5 cm x 18.3 cm, Model #3304G, and one pack of eight 5 mm sharp stay hooks, Model #3311-8G
3707	Collectoral kit: each kit contains one square disposable retractor ring, 14.1 cm x 14.1 cm, Model #3307G, and one pack of eight 5 mm sharp stay hooks, Model #3311-8G

Bekijk
video



CONTACTGEGEVENS

JAN WILLEM SCHOLTEN

Commercieel Directeur
Janwillem@medicaldynamics.nl
+31 (0)6 54 61 10 32

FRANCOIS VERHEES

Algemeen Directeur
francois@medicaldynamics.nl
+31 (0)30 285 11 05

EDWIN LUBBERS

Accountmanager, rayon Zuid-Oost
edwin@medicaldynamics.nl
+31 (0)6 46 10 07 00

REIJER SCHERRENBURG

Accountmanager, rayon Zuid-West
reijer@medicaldynamics.nl
+31 (0)6 29 95 02 73

KITTY WISSELS

Accountmanager, rayon Noord-West
kitty@medicaldynamics.nl
+31 (0)6 50 89 98 88

MEDICAL DYNAMICS

 Wijde Wade 1a
3439 NP Nieuwegein
Nederland

 T +31 (0)30 285 11 05
F +31 (0)30 285 11 06

 info@medicaldynamics.nl
 www.medicaldynamics.nl