


LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

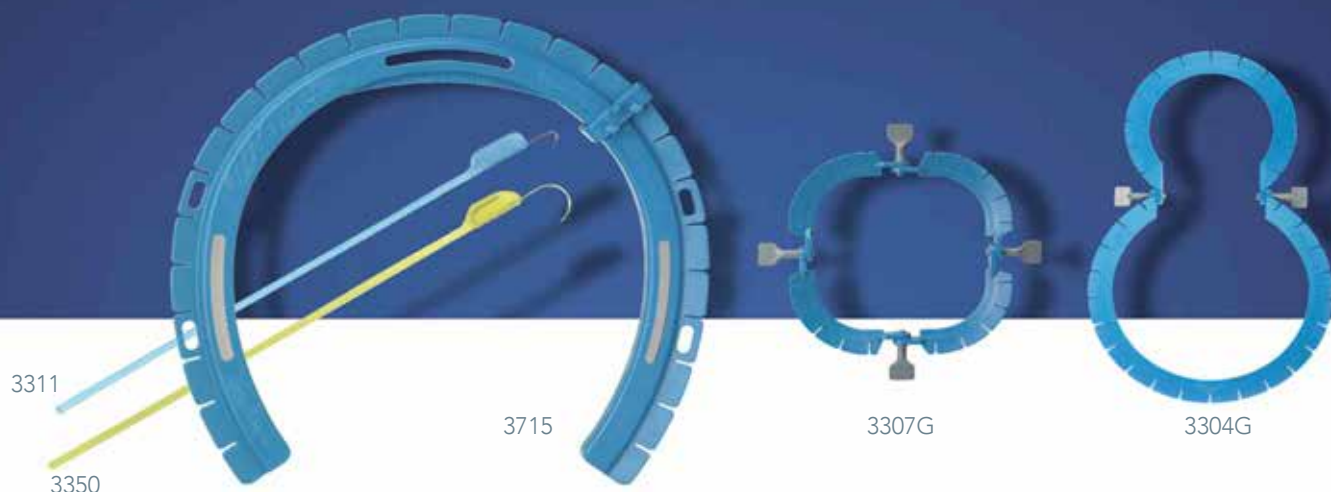

Met de Lone Star retractor kunt u weefsel eenvoudig op spanning brengen. Hierdoor is het te behandelen weefsel beter bereikbaar met uw instrumentarium en het geeft meer zicht in het operatiegebied. De Lone Star is voor verschillende chirurgische procedures ontwikkeld: Gynaecologie, Urologie, Colon- en rectale chirurgie, Hoofd- Hals chirurgie.

INDICATIES GYNAECOLOGIE:

- Reconstructieve bekkenbodembirurgie
- Plaatsen van Sub-urethrale slings
- Bekkenbodemb prolaps chirurgie
- Mesh excisions
- Reparatie fistula
- Vaginale hysterectomie
- Vaginale cystectomie
- Episiotomie reparatie



Bekijk
video



Specifiek voor de gynaecologie biedt de Lone Star APS Retractor het beste anatomische beeld voor onder andere reconstructieve bekkenbodembirurgie, obstetrische en vaginale chirurgie. De elastieken met ultra-precieze haakjes houden een consistente traxi in stand. Een variëteit aan stompe en scherpe haakjes zijn beschikbaar om naar wens te gebruiken bij diverse operaties.

LONE STAR - RETRACTOR SYSTEEM

CooperSurgical

INDICATIES UROLOGIE:

Urethraplatieken

INDICATIES COLORECTALE PROCEDURES:

Reparatie anale fistel
Rectale prolaps reparatie
Reparatie sphincter letsel
LAR/ Colostomose en anastomose
Hirschsprung procedure

INDICATIES HOOFDHALS CHIRURGIE:

Tracheostomie
Lymfeklierbiopsie
Mediane halscyste
Parotidectomie
Thyroidectomie

VOORDELEN LONE STAR REFRACTOR SYSTEEM:


- De beste onbelemmerde anatomische visualisatie van elk retractorsysteem
- OK personeel kan andere taken doen in de OK
- Geschikt voor verschillende chirurgische procedures
- Eenvoudig in gebruik
- Verschillende retractors en elastische haakjes verkrijgbaar



SIMPELE TECHNIEK IN 3 EENVOUDIGE STAPPEN



Plaats de Lone Star retractoring om de te nemen of bestaande incisie. Steek elastische haakjes in het weefsel en trek ze terug in direct tegenoverliggende kwadranten. Gleuven op de ring zorgen voor eenvoudige plaatsing voor gelijke en constante spanning.

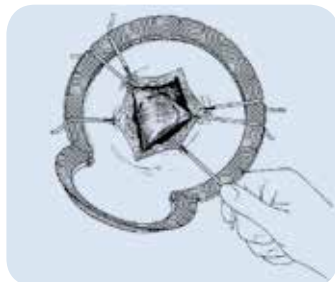

Naarmate de dissectie vordert, verplaatst u de elastische haakjes en voegt u indien nodig nieuwe toe om volledige, evenwichtige terugtrekking vanuit elke hoek te bereiken.



Plaats bij het sluiten de elastische haakjes langs de as van de incisie om spanning te creëren om een precieze niet- of hechtingplaatsing te vergemakkelijken

Lone Star® disposable retractor ringen

De Lone Star ringen zijn gemaakt van Noryl hars. De disposable retractor ringen worden geleverd in steriele dubbele "peel-pouches" om het product gemakkelijk aan te bieden aan het chirurgische veld. De Lone Star ringen zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en maten en zijn toepasbaar voor diverse operaties.

LONE STAR - RETRACTOR RINGEN

artikelnr.	omschrijving	
	LONE STAR DISPOSABLE RETRACTOR RINGS	
3301G	Surgical applications Retractor, sterile plastic, 25.3 cm x 11.3 cm	
3302G	Gynecology and Head and Neck Retractor, sterile plastic, 22.0 cm x 11.3 cm	
3304G*	Gynecology, especially narrow pelvis, obese Retractor, sterile plastic, 32.5 cm x 18.3 cm includes 2 each catheter clips	
3307G	Colon and Rectal Surgeries; also general surgery, head and neck Retractor, sterile plastic, 14.1 cm x 14.1 cm	
3308G*	Gynecology, Male Urology Retractor, sterile plastic, 28.3 cm x 18.3 cm	
3309G	Head and Neck, Pediatrics Retractor, sterile plastic, 18.6 cm x 8.9 cm	
3310G	General Surgery, Head and Neck Retractor, sterile plastic, 25.0 cm x 25.0 cm	
3715*	Gynecology APS retractor, sterile plastic, VELCRO backing 16.6cm x 16.6cm. includes 2 each catheter clips	

LONE STAR - ELASTISCHE HAAKJES

artikelnr.	omschrijving	
32058G	5 mm semi-blunt PRO-Stay, 8/pack	
33118G	5 mm sharp hook, 8/pack	
33148G*	3 mm sharp hook, 8/pack	
33168G*	5 mm blunt hook, 8/pack	
33254G	5 mm two-finger, 4/pack	
33274G	7 mm two-finger, 4/pack	
33294G	9 mm two-finger, 4/pack	
33304G	13 mm x 16 mm solid blade, 4/pack	
33314G	13 mm x 20 mm blunt, 4/pack	
33324G	14 mm x 16 mm two-finger, 4/pack	
33334G	14 mm x 20 mm two-finger, 4/pack	
33344G	20 mm x 16 mm four-finger, 4/pack	
33354G	20 mm x 20 mm three-finger, 4/pack	
33384G	6.5 mm x 16 mm solid blade, 4/pack	
33388G*	12 mm blunt hook, 8/pack	
3350L4G	12 mm blunt hook, elongated lead, 4/pack	
33844	12 mm two-finger blunt hook, 4/pack	
35501G	12 mm blunt hook, dual lead, 50/case	

Elastische haakjes om snel aan te brengen. Groot aanbod in stompe en scherpe haakjes. In verschillende maten en materialen verkrijgbaar voor elk type chirurgie. De haakjes zijn single-use.

artikel-nr.	omschrijving
	LONE STAR RETRACTOR KITS
3704	Gynecology kit: each kit contains one disposable retractor, 32.5 cm x 18.3 cm, Model #3304G, and one pack of eight 5 mm sharp stay hooks, Model #3311-8G
3707	Collectoral kit: each kit contains one square disposable retractor ring, 14.1 cm x 14.1 cm, Model #3307G, and one pack of eight 5 mm sharp stay hooks, Model #3311-8G

Bekijk
video

